



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ «ПРОФИ»



Компания «Теолаб» производит лабораторную мебель для научных и производственных центров уже почти 15 лет. Накопив огромный опыт и изучив потребности современных лабораторий, мы рады представить нашу новую флагманскую разработку — серию «Профи». Это современная линейка металлической мебели, в которой мы переосмыслили стандарты надежности, эргономики и эстетики рабочего пространства.

Стальной цельносварной каркас не разбалтывается со временем, уверенно обеспечивает работу тяжелого аналитического оборудования и не боится случайных брызг агрессивных реагентов. Мебель «Профи» сохраняет свою идеальную геометрию и внешний вид даже спустя десятилетия интенсивной эксплуатации, избавляя вас от необходимости частой замены.

Новая серия закрывает задачу по комплектации объекта под ключ. Ассортимент линейки включает в себя полный набор мебели: вытяжные шкафы, открытые и закрытые лабораторные столы, рабочие места с надстройками, шкафы и стеллажи для безопасного хранения, а также передвижные тумбы и вспомогательные столики. Все элементы модульные, выполнены в едином стиле и идеально сочетаются друг с другом, позволяя собрать лабораторию любой конфигурации.

Серия «Профи» от «Теолаб» — это новый стандарт качества для тех, кто ценит свое время, безопасность и комфорт. Листайте каталог, чтобы подобрать идеальное оснащение для вашей лаборатории, где будет приятно и удобно работать каждый день.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вытяжные шкафы.....	4
Вытяжные шкафы без сантехники	5
Вытяжные шкафы со встроенной сантехникой	5
Столы пристенные с надстройкой.....	6
Столы пристенные закрытые	8
Столы лабораторные	10
Тумбы подкатные	12
Столы для титрования.....	14
Столы для весов.....	16
Столы-мойки	18
Инструментальные столики	20
Стеллажи	22
Шкафы для хранения.....	24
Шкафы для безопасного хранения ЛВЖ.....	27
Шкафы для безопасного хранения кислот и щёлочей.....	27

ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ



Поднятый защитный экран не увеличивает общую высоту шкафа.
Металлический цельносварной каркас из труб 25 × 25 мм.
Рабочая поверхность:
керамогранитные плиты или столешница с химстойким пластиком.
В нижней тумбе есть вытяжка: в ней можно хранить реактивы.

- Вытяжные шкафы «Профи» созданы для безопасной работы в лаборатории. Модели легко адаптируются под задачи любой лаборатории. Вы можете выбрать подходящую ширину, тип рабочей поверхности (керамогранит или химстойкий пластик) и комплектацию с подводкой воды.
- Сделаны на сборно-сварном каркасе из стальной трубы 25 × 25 мм. Вытяжная камера из алюминиевого профиля, стенки из стали 0,8 мм. Подъёмный экран из стекла. Трёхзонная система вытяжки: из верхней части вытяжного короба, с уровня рабочей поверхности и из нижней тумбы. Диаметр фланца вытяжки 200 мм.
- Рабочая зона освещается светодиодной лампой (входит в комплектацию). Три розетки на 220 В суммарной мощностью 3,5 кВт и выключатель для лампы располагаются на сервисной панели под рабочей камерой.
- Ножки регулируются по высоте, что даёт возможность выравнять мебель в помещении с неровными полами.



ШВ-1200-С-КГ-Профи



ШВ-1500-С-КГ-Профи



ШВ-1800-С-КГ-Профи

Вытяжные шкафы без сантехники

Модель	Габариты, мм			Внутренние размеры рабочей камеры, мм			Рабочая поверхность
	Ш	Г	В	Ш	Г	В	
ШВ-1200-КГ-Профи	1200	700	1960	1166	594	1090	Керамогранит
ШВ-1500-КГ-Профи	1500	700	1960	1466	594	1090	
ШВ-1800-КГ-Профи	1800	700	1960	1766	594	1090	
ШВ-1200-ХП-Профи	1200	700	1960	1164	594	1090	Химстойкий пластик
ШВ-1500-ХП-Профи	1500	700	1960	1466	594	1090	
ШВ-1800-ХП-Профи	1800	700	1960	1766	594	1090	

Вытяжные шкафы со встроенной сантехникой

Модель	Габариты, мм			Внутренние размеры рабочей камеры, мм			Рабочая поверхность
	Ш	Г	В	Ш	Г	В	
ШВ-1200-С-КГ-Профи	1200	700	1960	1166	594	1090	Керамогранит
ШВ-1500-С-КГ-Профи	1500	700	1960	1466	594	1090	
ШВ-1800-С-КГ-Профи	1800	700	1960	1766	594	1090	
ШВ-1200-С-ХП-Профи	1200	700	1960	1164	594	1090	Химстойкий пластик
ШВ-1500-С-ХП-Профи	1500	700	1960	1466	594	1090	
ШВ-1800-С-ХП-Профи	1800	700	1960	1766	594	1090	

СТОЛЫ ПРИСТЕННЫЕ С НАДСТРОЙКОЙ



Полки для размещения посуды или реактивов.
Светодиодная лампа для освещения столешницы.
Розетки и выключатель лампы.
Сварной каркас.
Нижняя тумба с полкой.

- Пристенные столы с надстройкой – лучшее решение для небольшой лаборатории. Они предназначены для работы стоя: высота от пола до столешницы равна 85 см. Общая высота стола 165 см. Глубина надстройки 25 см.
- Надстройка с полочками позволяет компактно хранить реактивы и лабораторную посуду рядом с рабочим местом. Лампа для освещения рабочей поверхности расположена под полкой.
- Столы сделаны на сборно-сварном каркасе из стальной трубы 25 × 25 мм, стенки из стали 0,8 мм. Столешница из керамогранитных плит или химстойкого пластика. У стола есть тумбы для хранения с двумя или тремя распашными дверцами. Ножки регулируются по высоте.



СЛП-1200-КГ-Профи



СЛП-1500-КГ-Профи

Столы пристенные с надстройкой

Модель	Габариты, мм			Рабочая поверхность
	Ш	Г	В	
СЛП-1200-КГ-Профи	1200	700	1650	Керамогранит
СЛП-1200-ХП-Профи	1200	700	1650	Химстойкий пластик
СЛП-1500-КГ-Профи	1500	700	1650	Керамогранит
СЛП-1500-ХП-Профи	1500	700	1650	Химстойкий пластик



СТОЛЫ ПРИСТЕННЫЕ ЗАКРЫТЫЕ



Металлический сварной каркас.
Нижняя тумба с полкой.

- Пристенные столы-тумбы позволяют хранить большое количество посуды или оборудования рядом с рабочим местом. Столы предназначены для работы стоя: высота от пола до столешницы равна 85 см.
- Основа стола — сварной каркас из стальной профильной трубы 25 × 25 мм. Боковые панели сделаны из стали 0,8 мм. Столешница из керамогранитных плит или химстойкого пластика.
- Ножки регулируются по высоте, что даёт возможность выравнять мебель в помещении с неровными полами.



СЛЗ-1200-КГ-Профи



СЛЗ-1500-КГ-Профи

Закрытые пристенные столы

Модель	Габариты, мм			Рабочая поверхность
	Ш	Г	В	
СЛЗ-1200-КГ-Профи	1200	700	850	Керамогранит
СЛЗ-1200-ХП-Профи	1200	700	850	Химстойкий пластик
СЛЗ-1500-КГ-Профи	1500	700	850	Керамогранит
СЛЗ-1500-ХП-Профи	1500	700	850	Химстойкий пластик




СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ



Металлический сварной каркас.
Ножки регулируются по высоте.

- Открытые лабораторные столы с металлическим сварным каркасом из стальной профильной трубы 25 × 25 мм. Такие столы выпускаются двух разных высот: для работы сидя (высота стола 75 см) и для работы стоя (85 см).
- Все модели оснащаются регулируемыми опорами, которые позволяют легко выставить мебель по уровню даже на неровном полу.

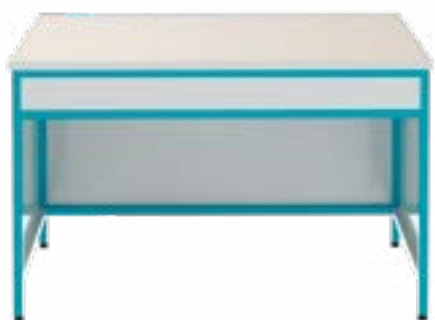

СЛН-1200-КГ-Профи



СЛН-1500-КГ-Профи

Столы лабораторные низкие открытые

Модель	Габариты, мм			Рабочая поверхность
	Ш	Г	В	
СЛН-1200-КГ-Профи	1200	700	750	Керамогранит
СЛН-1200-ХП-Профи	1200	700	750	Химстойкий пластик
СЛН-1500-КГ-Профи	1500	700	750	Керамогранит
СЛН-1500-ХП-Профи	1500	700	750	Химстойкий пластик



СЛВ-1200-КГ-Профи



СЛВ-1500-КГ-Профи

Столы лабораторные высокие открытые

Модель	Габариты, мм			Рабочая поверхность
	Ш	Г	В	
СЛВ-1200-КГ-Профи	1200	700	850	Керамогранит
СЛВ-1200-ХП-Профи	1200	700	850	Химстойкий пластик
СЛВ-1500-КГ-Профи	1500	700	850	Керамогранит
СЛВ-1500-ХП-Профи	1500	700	850	Химстойкий пластик



TK-420-D-Профи



TK-420-DЯ-Профи



TK-420-Y-Профи

Подкатные металлические тумбы можно разместить под любым столом: высота стандартной тумбочки 55 см. Сборный каркас из металлических панелей, изготовленных из стали 0,8 мм. Можно выбрать нужное сочетание выдвижных шкафов и полок.

Тумбы подкатные

Модель	Габариты, мм			Комплектация
	Ш	Г	В	
TK-420-D-Профи	420	460	550	Распашная дверца, полка-вкладыш
TK-420-DЯ-Профи	420	460	550	Распашная дверца, выдвижной ящик
TK-420-Y-Профи	420	460	550	3 выдвижных ящика





СТЕКЛЯННАЯ и ФАРФОРОВАЯ ПОСУДА для ВАШЕЙ ЛАБОРАТОРИИ



ЛАБОРАТОРНАЯ САНТЕХНИКА



СТОЛЫ ДЛЯ ТИТРОВАНИЯ



Полки для размещения посуды или реактивов.
Светодиодная панель для освещения бюреток.
Розетки и выключатель светодиодной панели.
Сварной каркас.

- Лабораторные столы с панелью, в которую вмонтированы 4 (СТ-1200-ХП-Профи) или 6 (СТ-1400-ХП-Профи) штативов для бюреток. Они предназначены для аналитических лабораторий с большим количеством рутинных операций титрования вручную или для практикумов в учебных заведениях.
- Стол оснащён выключателем и электророзетками для подключения приборов. Зона титрования подсвечивается для удобства работы. Основа стола — сварной каркас из стальной профильной трубы 25 × 25 мм. Боковые панели сделаны из стали 0,8 мм.



СТ-1200-ХП-Профи



СТ-1500-ХП-Профи

Стол для титрования

Модель	Габариты, мм			Рабочая поверхность
	Ш	Г	В	
СТ-1200-ХП-Профи	1200	700	1650	Химстойкий пластик
СТ-1500-ХП-Профи	1500	700	1650	Химстойкий пластик



СТОЛЫ ДЛЯ ВЕСОВ




Столешница на демпферах.
Устойчивый металлический каркас.

- Конструкция столов для весов демпфирующая, то есть позволяет гасить ненужные вибрации. Столы выполнены на устойчивом металлическом сварном каркасе из стальной профильной трубы 25 × 25 мм. Боковые панели сделаны из стали 0,8 мм. Вторая столешница располагается на специальных резиновых демпфирующих ножках. Модель СВ-1200-ЛД-Профи имеет дополнительную рабочую поверхность справа.



СВ-750-ЛД-Профи

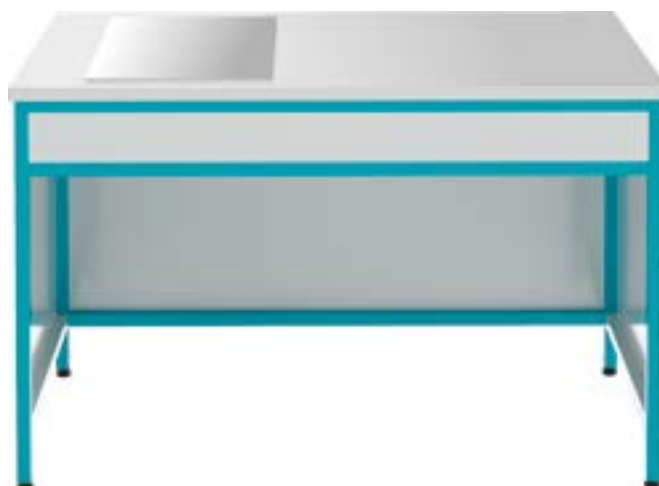

СВ-1200-ЛД-Профи

Стол для весов

Модель	Габариты, мм			Рабочая поверхность
	Ш	Г	В	
СВ-750-ЛД-Профи	750	700	750	Ламинированная ДСП
СВ-1200-ЛД-Профи	1200	700	750	Ламинированная ДСП



СТОЛЫ-МОЙКИ



- В серии «Профи» два вида столов-моек – с одной или двумя мойками. Высота до столешницы — 85 см. Материал мойки – нержавеющая сталь или полипропилен. Смеситель выполнен из латуни, с полимерным покрытием.



МО-800-НС-Профи



МД-1200-НС-Профи

Стол-мойки

Модель	Раковина	Габариты, мм			Рабочая поверхность
		Ш	Г	В	
МД-1200-Профи	двойная, пропилен	1200	700	850	Химстойкий пластик
МО-800-Профи	одинарная, пропилен	800	600	850	Химстойкий пластик
МД-1200-НС-Профи	двойная, нерж. сталь	1200	700	850	Химстойкий пластик
МО-800-НС-Профи	одинарная, нерж. сталь	800	600	850	Химстойкий пластик



ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ



Съёмные полочки из стекла или металла.

- Передвижные столики для инструментов сделаны на сварной раме из трубы 20 × 20 мм. Их высота 96 см. Полки могут быть из стекла или металла. В одной модели есть выдвижной ящик. Легко можно перемещать с места на место. На двух колесиках есть тормоз, при необходимости столик можно застопорить.



СИП-650-Профи



СИП-650-Ст-Профи



СИП-650-Я-Профи

Инструментальные лабораторные столики

Модель	Габариты, мм			Комплектация
	Ш	Г	В	
СИП-650-Профи	650	490	960	3 металлические полки
СИП-650-Ст-Профи	650	490	960	3 стеклянные полки
СИП-650-Я-Профи	650	490	960	3 металлические полки, выдвижной ящик



СТЕЛЛАЖИ



Металлический каркас.
Ширину стеллажа можно выбрать под размер вашей лаборатории.

- Открытые металлические стеллажи высотой два метра. Практичное решение для хранения реактивов, оборудования, расходников и других лабораторных принадлежностей даже в скромных по размеру помещениях.



ОС-1000-Профи



ОС-1200-Профи



ОС-1500-Профи

Стеллажи

Модель	Габариты, мм		
	Ш	Г	В
ОС-1000-Профи	1000	400	2000
ОС-1200-Профи	1200	400	2000
ОС-1500-Профи	1500	400	2000



ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ



Металлический сварной каркас.
Дверцы из стекла или металла.

- Закрытые металлические лабораторные шкафы для хранения посуды, приборов, документов, реагентов или материалов. Сборно-сварной каркас из стальной трубы 25 × 25 мм. Стенки и металлические дверцы сделаны из стали 0,8 мм.
- Если дверцы стеклянные, то полки за ними тоже стеклянные. Если дверцы глухие металлические, то и полки металлические.
- Все модели шкафов оснащаются регулируемыми опорами, которые позволяют легко выставить мебель по уровню даже на неровном полу.



ШИ-400-Профи



ШР-400-Профи




ШП-400-Профи



ШИ-800-Профи

Шкафы для хранения

Модель	Габариты, мм			Патрубок для вытяжки	Дверцы	Полки
	Ш	Г	В			
ШИ-400-Профи	400	460	1820	-	2 металлические с замком	4 металлические
ШП-400-Профи	400	460	1820	-	стеклянная и металлическая с замком	2 стеклянные, 2 металлические
ШР-400-Профи	400	460	1820	да	2 металлические с замками	4 металлические
ШИ-800-Профи	800	460	1820	-	2 металлические с замком	4 металлические
ШР-800-Профи	800	460	1820	да	2 металлические с замком	4 металлические
ШО-800-Профи	800	460	1820	-	2 металлические с замком	2 металлические, штанга для одежды
ШБ-400-Профи	400	460	1820	-	металлическая с замком	1 металлическая полка, крепление для одного баллона
ШБ-800-Профи	800	460	1820	-	2 металлические с замком	1 металлическая полка, крепление для двух баллонов
ШП-800-Профи	800	460	1820	-	2 стеклянные и 2 металлические с замком	2 стеклянные и 2 металлические

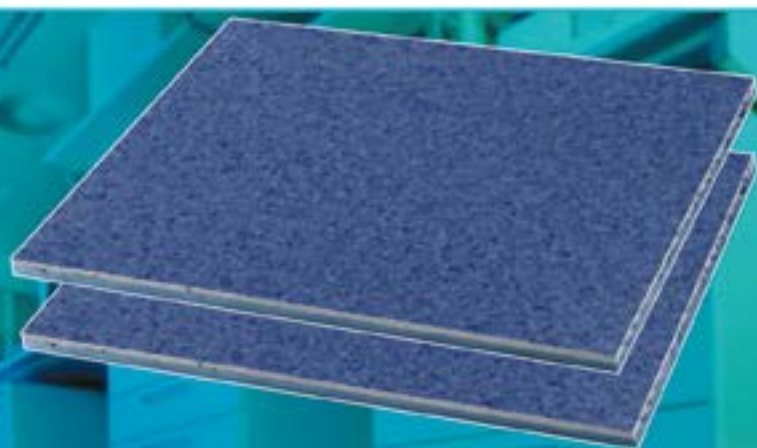

ЛИНОЛЕУМ

Химически стойкий линолеум для лабораторий CF869

-  **Устойчив к химическим реагентам**
-  **Легко очищается и дезинфицируется**
-  **Износостойкий и долговечный**
-  **Нескользящая поверхность**
-  **Безопасен для людей и окружающей среды**

Химически стойкий линолеум разработан специально для лабораторий и отвечает строгим требованиям безопасности и гигиены. Он создан для помещений, где пол ежедневно контактирует с агрессивными веществами. Устойчив к воздействию кислот, щелочей, растворителей, масел и спиртов — всех реагентов, которые составляют повседневную лабораторную практику.

Плотная, неигроскопичная структура материала не впитывает пролитые вещества и предотвращает появление пятен, вздутий и разрушения основания. Покрытие выдерживает регулярную уборку и механические нагрузки, характерные для рабочих зон лаборатории.



Шкафы для безопасного хранения ЛВЖ



- Шкафы обеспечивают безопасное хранение легковоспламеняющихся жидкостей.
- Объем хранения 15 до 410 л.
- Сделаны из сварной стали толщиной 1 мм с изолирующим воздушным пространством для огнестойкости.
- Самозакрывающиеся двери быстро захлопываются для максимальной защиты в условиях пожара.
- Шкафы оснащены герметичным нижним поддоном, двумя вентиляционными отверстиями с пламегасителями, четырьмя регулируемыми ножками, заземляющим разъёмом.
- Прочная эпоксидная / полиэфирная порошковая краска без свинца обеспечивает химическую стойкость.

Шкафы для безопасного хранения кислот и щёлочей



- Бесшовная сварная конструкция из полипропиленовых плит.
- Объем хранения от 15 до 340 л.
- Регулируемые полки, прочные устойчивые к коррозии петли, надёжные дверцы и выравнивающие ножки.
- Полипропиленовые поддоны, прикрепленные к полкам шкафов, устойчивы к агрессивным химическим веществам.
- Нормальный срок службы более 10 лет.



За консультацией по подбору мебели
обращайтесь в компанию «НВ-Лаб»:

www.nv-lab.ru

info@nv-lab.ru

+7 800 500 9380

+7 495 642 8660

107076, Россия, г. Москва,
ул. Богородский вал, д.3



NV-LAB

ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ